

DIE 100 % NICHT-CHIRURGISCHE LÖSUNG

Orbera365™
managed weight loss system



OHNE OPERATION GEWICHT VERLIEREN



WELTWEIT MEHR ALS 217.000
NR. 1
UNTER DEN
MAGENBALLONEN
BALLONE EINGESETZT

Verlieren Sie 3x mehr Gewicht als mit Diät
und einem Bewegungsprogramm allein

Jetzt mit 12-monatiger Unterstützung

HABEN SIE ES SATT, GELD FÜR PROGRAMME ZUR GEWICHTSREDUKTION AUSZUGEBEN, DIE NICHT FUNKTIONIEREN?

Das ORBERA365™-System zur Gewichtsreduktion verhilft Ihnen in nur 6 Monaten zu positiven Ergebnissen und bleibt bis zu 12 Monate im Magen. Während dieser Zeit werden Sie laufend betreut.

ORBERA365™ vereint die führende Magenballon-Technologie mit der Unterstützung durch ein Expertenteam sowie einem individuell angepassten Ernährungs- und Bewegungsplan.


Dieses umfassende Programm kombiniert die Kontrolle der Essensportionen durch den Magenballon mit dem nachhaltigen Coaching für eine gesunde Lebensweise und sorgt so für einen wirksamen und unbedenklichen Gewichtsverlust.

3X MEHR GEWICHT ZU VERLIEREN




SO FUNKTIONIERT ORBERA365™


DIE 100 % NICHT-CHIRURGISCHE LÖSUNG

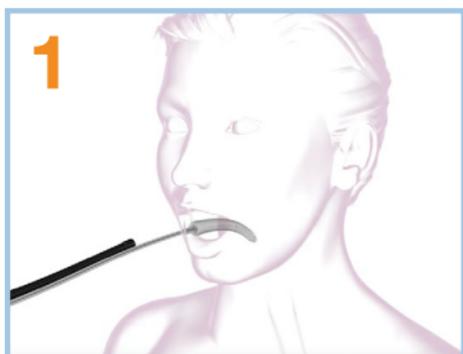

ORBERA® wird im schlaffen Zustand durch den Mund in den Magen eingeführt.

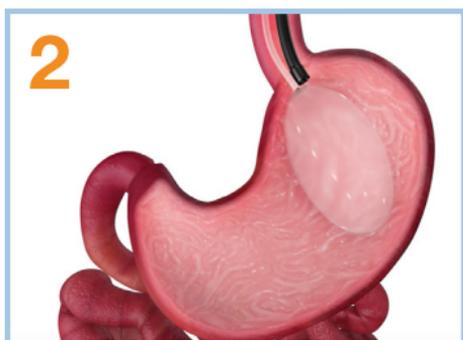


Anschließend wird der Ballon mithilfe einer 50-ml-Spritze mit einer sterilen Kochsalzlösung befüllt, bis er die Größe einer Grapefruit erreicht.

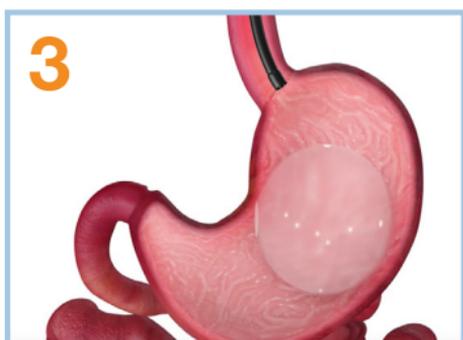

Der Ballon nimmt in Ihrem Magen so viel Platz ein, dass Sie sich einfacher an gesündere Portionsgrößen gewöhnen können.

BIS ZU 12 MONATE SPÄTER

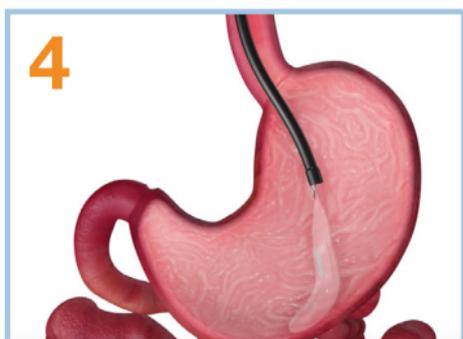

Der Ballon wird 12 Monate später in einem nicht-chirurgischen Verfahren entfernt.

ORBERA365™ HILFT IHNEN, SICH SCHNELLER SATT ZU FÜHLEN UND KLEINERE MAHLZEITEN ZU SICH ZU NEHMEN.

**12
MONATE**

12 MONATE „TRAGEZEIT“ UND LAUFENDE UNTERSTÜTZUNG

Lernen Sie mit der Unterstützung eines Expertenteams, wie Sie in 12 Monaten Ihre Lebensweise ändern und Ihr neues Gewicht halten.



KEINE CHIRURGISCHE GEWICHTSREDUKTION

ORBERA365™ ist ein reversibles nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichtsreduktion, d. h. es erfolgt ohne Schnitte, Nähte, Wunden oder anatomische Veränderungen.

277.000

ECHTE ERGEBNISSE

Weltweit wurden mehr als 277.000 Magenballons verkauft.

**20
JAHRE**

DER FÜHRENDE BALLON ZUR GEWICHTSREDUKTION

ORBERA® ist der weltweite Marktführer unter den Ballons zur Gewichtsreduktion und hat in über 20 Jahren bereits Tausenden beim Erreichen ihrer Abnahmeziele geholfen

OPTIMIERTES BALLONDESIGN

Der gute Ruf von ORBERA® beruht auf Qualität, Zuverlässigkeit und der weltweiten Führungsposition. Die Hauptmerkmale des ORBERA® Magenballonen tragen zu seinem herausragenden Standing und seinem jahrelangen Erfolg bei. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre Sicherheit und Ihr Gewichtsverlust beim Design des Magenballons im Mittelpunkt stehen.






Superglatt und rund

Der ORBERA365™ Ballon hat keine Unebenheiten, keine scharfen Kanten und keine harten Oberflächen, die Ihren Magen reizen könnten. Das innovative Design von ORBERA365™ bietet eine unglaublich glatte, weiche und runde Form, wodurch Ihre Sicherheit höchste Priorität erhält und das Risiko von Magengeschwüren begrenzt wird.



Mehr als 7 Schichten hochdichtes Silikon

Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer besteht jeder ORBERA365™ Magenballon aus mehr als 7 Schichten von hochwertigstem medizinisch zugelassenem Silikon und kann so problemlos Verdauungssäften und Magensäure über den Zeitraum von 12 Monaten standhalten.

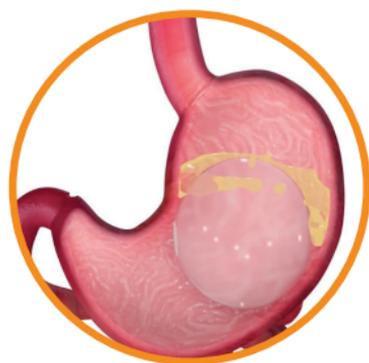

Effektiver Gewichtsverlust

Der ORBERA365™ Ballon nimmt im Magen so viel Platz ein, dass Sie Ihre Essensportionen besser kontrollieren können und ein Sättigungsgefühl verspüren, ohne sich unwohl zu fühlen. Größe und Form des ORBERA365™ Ballons helfen Patienten nachweislich, bis zu 3x mehr Gewicht zu verlieren als mit Diät und einem Bewegungsprogramm.



Optimale und individuell anpassbare Größe

Der ORBERA365™ Ballon kann an Ihre Magengröße angepasst werden, sodass er genau die richtige Menge an Platz einnimmt. Jeder Ballon hat etwa die Form und Größe einer Grapefruit und kann entsprechend Ihrer Magengröße mit 400 bis 700 ml gefüllt werden.

ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

Wie hoch sind die Kosten?

Die Gesamtkosten des ORBERA365™ Programms variieren, doch in der Regel gibt es einen Pauschalpreis, in dem der ORBERA365™ Ballon, die Verfahren zur Ballonplatzierung und -entfernung, die Gebühren der Einrichtung und die 18-24-monatige Betreuung durch einen Arzt und einen Ernährungscoach enthalten sind.

Wie fühlt es sich an?

ORBERA365™ nimmt im Magen des Patienten Platz ein und sorgt dafür, dass bereits nach einer kleinen Mahlzeit ein Sättigungsgefühl einsetzt. Der Ballon hilft Ihnen in den 12 Monaten, in denen er in Ihrem Magen verbleibt, Portionsgrößen besser kontrollieren zu können.

Im Normalfall braucht Ihr Körper wenige Tage, um sich an den ORBERA365™ Ballon zu gewöhnen. Bei den meisten Patienten kommt es zu Übelkeit, Erbrechen und Reflux, doch diese Beschwerden verschwinden in der Regel und werden von Ihrem Arzt behandelt.

Wie funktioniert es tatsächlich? Mit wie viel Gewichtsverlust kann ich rechnen?

ORBERA® hat Tausenden von Patienten weltweit geholfen, hartnäckige Fettpolster zu verlieren. ORBERA® wurde weltweit in mehr als 200 klinischen Studien untersucht. In der FDA-Zulassungsstudie verloren die Patienten im Durchschnitt 3x mehr Gewicht als mit Diät oder einem Ernährungsprogramm bzw. rund 10 % ihres Körpergewichts.

Wann sehe ich die Ergebnisse?

Es kommt bereits nach kurzer Zeit zu einer Gewichtsreduktion. Dabei erfolgt der größte Gewichtsverlust in den ersten drei Monaten nach der Platzierung des Ballons. ORBERA365™ kann bis zu 12 Monate im Magen bleiben, um Ihnen dabei zu helfen, weiter Gewicht zu reduzieren und Ihre Lebensweise zu ändern. Darüber hinaus erhalten Sie ein mehr als 12-monatiges Coaching, in dem Sie die nötige Schulung und Unterstützung bekommen, um Ihr neues Gewicht langfristig zu halten.

Was mache ich, wenn ich zunehme?

Vielen Menschen gelingt es, die Zeit mit ihrem ORBERA365™ Ballon und das Coaching dafür zu nutzen, einen neuen Lebensstil zu entwickeln, sodass sie ihr neues Gewicht halten oder unter Umständen noch weiter abnehmen können. Deshalb sind das Coaching und die Nachsorge nach Entfernung des Ballons so wichtig. Bei manchen Patienten kann es jedoch zu einer erneuten Gewichtszunahme kommen, nachdem der Ballon entfernt wurde,

„Ich habe **mit**
ORBERA® 14 kg
abgenommen und
das neue Gewicht **5**
Jahre gehalten..“

Dank ORBERA® verlor
Andrew 14 kg.





**SIND SIE BEREIT, MIT
ORBERA365™ GEWICHT ZU
VERLIEREN?**

**FANGEN SIE NOCH
HEUTE AN!**

www.orbera.com/de